

CX-Plus Glaslonomer

Un Cemento de Ionómero de Vidrio Mejorado

MonoCem®

Cemento de resina, Auto-Adhesivo

SHOFU

CX-Plus Glaslonomer

Un ionómero de vidrio reforzada con cemento y prolongado tiempo de trabajo.

- Indicado para la cementación de coronas, incrustaciones, puentes largos y aparatos de ortodoncia
- Tiempo prolongado de trabajo sin ningún cambio en la viscosidad seguido de un Snap-Set
- Bajo espesor de la película (20µm) con alta resistencia a la compresión (177 MPa)
- Bonos a la dentina y el esmalte para proporcionar una excelente sellado marginal y superar la sensibilidad postoperatoria
- Alta liberación de flúor
- Alto nivel de radiopacidad
- Biocompatible

Información de orden


- Numero de parte 1166
- 35g CX-Plus Powder
- 17mL CX-Plus Liquid
- Numero de parte 1167
- 35g CX-Plus Powder
- Numero de parte 1168
- 17mL CX-Plus Liquid
- Numero de parte 1169
- (3) 35g CX-Plus Powder
- (3) 17mL CX-Plus Liquid



CASE STUDY



Uno: Aislar, limpiar y humedecer la preparación.

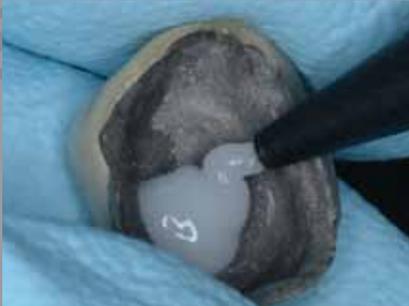

Dos: Inyectar MonoCem en la corona y posicionarla.



Tres: Aplicar presión oclusal.



Cuatro: Fotocurar, manteniendo presión oclusal.



Cinco: Eliminar exceso en los márgenes, y pulir corona.

Photos courtesy of George Freedman DDS, FAACD,

MonoCem®

- Se adhiere a todos los sustratos con altos valores de retención
- Tolerante a la humedad con 2 segundos para curar tachuela, limpieza fácil
- Elimina la sensibilidad y cuenta con alta liberación de fluoruro
- 100% de polimerización /cura dual: 3 minutos auto curación, 20 segundos foto curación
- Comandada, curando comienza en la colocación
- Película de muy bajo espesor (<12µm)

Visit www.shofu.com or call **800.827.4638**



MonoCem cemento de resina auto adhesivo es muy sencillo de usar y muy eficaz. Se maneja bien con excelentes propiedades de flujo y la limpieza es fácil. MonoCem exhibe todas las propiedades ideales de un cemento de fijación adhesivas en las restauraciones de cerámica.

Eugene L. Antenucci, DDS
Huntington, NY

Yo uso MonoCem porque yo solo uso lo mejor para mis pacientes.
Robert Girschek, DMD
Waltham, MA



Información de orden

- Numero de parte 3208A
- (2) 3,5 jeringas transparentes
- Numero de parte 3209A
- (2) 3,5 jeringas blancas
- 15 Puntas Aplicadores
- 2 OneGloss® PS Midi-Points
- Dirección de manejo



Shofu Dental Corporation
1225 Stone Drive
San Marcos, CA
92078-4059, USA

SN116-1012

Cemento de resina, Auto-Adhesivo